



GRUETTA SOLLEVAPERSONE HANDYLIFT

COD. SPGH-MDE

Handylift è un braccio di sollevamento elettromeccanico che ha la funzione di agevolare il trasferimento del passeggero dalla sua carrozzina al sedile originale del veicolo. Abitualmente installato in corrispondenza della portiera anteriore destra del veicolo, ha tuttavia la possibilità di essere alloggiato su altri vani di accesso di veicoli idonei ad accoglierlo. La robusta imbracatura, realizzata in materiale traspirante lavabile, viene agganciata ad **Handylift** che, con i suoi tre punti di rotazione orizzontale abbinati al sistema di sollevamento elettrico, permette di trasferire la persona in modo rapido e semplice.

La nuova versione del dispositivo ha un PESO PROPRIO DI 9,5 Kg, una PORTATA DI 120 Kg (ridotto a 90 Kg in caso di utilizzo staffa mobile installata su cardini portiera) ed è corredata di serie di telecomando WI-FI per l'azionamento del motoriduttore elettrico, munito di sistema anti-schiacciamento, e illuminazione a LED per agevolare le operazioni di carico in caso di scarsa illuminazione.

Handylift è realizzato in acciaio appositamente trattato e verniciato, corredata di boccole di rotazione in tecnopolimero che lo rendono utilizzabile anche in ambienti umidi, grazie anche al motoriduttore con grado di protezione IP 66 ed alla centralina di comando con grado di protezione IP 44.

Concluse le operazioni di trasferimento, **Handylift** viene sfilato dalla staffa di supporto installata sul veicolo e riposto nell'apposita borsa di contenimento. È possibile utilizzare lo stesso dispositivo per effettuare l'operazione di trasferimento su diversi veicoli se corredata di apposita staffa.

Il dispositivo **Handylift**, è riconosciuto come dispositivo medico di classe I (conforme alla direttiva 93/42 CE) e può essere accessorizzato per l'uso domestico.

GRUETTA SOLLEVAPERSONE HANDYLIFT

COD. SPGH-MDE



- Munita di staffa di ancoraggio al veicolo fissa o asportabile
- Smontabile
- Corredata di borsa per contenimento e trasporto
- Imbragatura di contenimento ergonomica lavabile disponibile in tre taglie (S - M - L)
- Portata 120 Kg (90 KG con staffa mobile)
- Escursione di sollevamento 440 mm
- Movimentazione elettrica con comando wi-fi e sistema di emergenza manuale.
- Munita di sistema di illuminazione a Led



PERCHÈ SPGH-MDE ?

- ✓ Sistema anti schiacciamento
- ✓ Pulsantiera Wi-Fi
- ✓ Installabile su ogni tipologia di veicolo
- ✓ Presenza di luci a LED
- ✓ Peso proprio solo 9,5 KG



 **HandyTech**®

Marchio di **CARROZZERIA 71**srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it




Member of

Approved by

Production process
certified by

Certified company

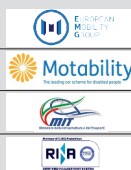

Rivenditore autorizzato

